

"Sterile Absorbable
POLYDIOXANONE Suture with Needle"



„Sterile absorbierbare
POLYDIOXANON
Fäden mit Nadel

MESOTRAX

MESO
FADENLIFTING

LaserPoint® AG

MESO
MESO LIFTING THREAD

TRAX



MESOTRAX FADENTYPEN

MESOTRAX TWISTED MONO

Der TWISTED MONO Faden ist ein Monofilament aus Polydioxanon mit einer glatten Oberfläche, dieser wird in erster Linie für das Lifting verwendet. Zu erwarten ist ein mildes Lifting und Hautstraffung. Der TWISTED MONO ist sehr einfach einzuführen.



ARTIKEL	Durchmesser	Achsenfarbe	USP	Nadellänge	Fadenlänge
TWISTED MONO	30G	Gelb	6-0	25mm	30mm
	29G	Pink	6-0	38mm	50mm
				50mm	75mm
	27G	Grau	5-0	60mm	90mm
ARTIKEL	Durchmesser	Achsenfarbe	USP	Nadellänge	Fadenlänge
TWISTED MONO	26G	Braun	5-0	90mm	150mm

100 Stück / Schachtel

Eine Schachtel besteht aus 10 Vakuumbbeutel.
 Jeder Vakuumbbeutel enthält 2 sterile Verpackungen mit 5 Fäden jeweils.

MESOTRAX SUPER SPRING

Der Faden ist um die Nadel herum aufgewickelt. Er ist gedehnt wenn er in die Haut eingeführt wird, aber er hat die Eigenschaft, in seine ursprüngliche Wicklungsposition zurückzukehren, nachdem er eingeführt wurde.

Aufgrund seiner Elastizität, erzielen der MESOTRAX SUPER SPRING sehr gute Ergebnisse beim Wiederaufbau, beim Volumen und der Straffung, folglich kann auch mit einer kleinen Anzahl Fäden ein gutes Ergebnis erzielt werden.



[Einzelheit der Spirale]



ARTIKEL	Durchmesser	Achsenfarbe	USP	Nadellänge	Fadenlänge
SUPER SPRING	29G	Pink	6-0	25mm	30mm
				38mm	55mm
				50mm	75mm

100 Stück / Packung

Eine Packung besteht aus 10 Vakuumbbeutel.
 Jeder Vakuumbbeutel enthält 2 sterile Verpackungen mit jeweils 5 Fäden.

MESOTRAX COG

Der **MESOTRAX COG** Faden verfügt über bidirektionale Widerhaken. Der Faden mit bidirektionalen Widerhaken wird durch eine Mikrobearbeitungstechnik aus Monofilamenten hergestellt.


Im Vergleich zu herkömmlichen linearen angeordneten Wiederhaken, haben die oberen und unteren bidirektionalen Fäden folgende Vorteile:

Der Faden bleibt viel stabiler und der Lifting-Effekt hält länger an, es ist jedoch bei der Behandlung ein hohes technisches Know-How und Lokalanästhesie erforderlich.

[MESOTRAX SPIRAL BLUNT COG]

MESOTRAX COG

Der **MESOTRAX SPIRAL SHARP COG Faden** hat eine spitze Nadel, während der **MESOTRAX SPIRAL BLUNT COG** über eine stumpfe Nadel (Kanüle) verfügt, dadurch sind die Schmerzen und das Hämatom Risiko geringer.

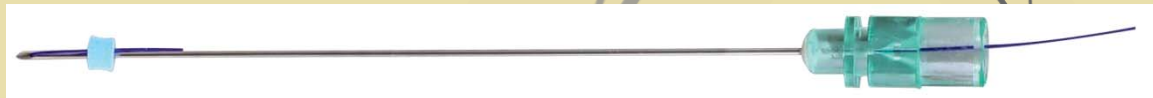

[MESOTRAX SPIRAL
SHARP COG]



[MESOTRAX SPIRAL BLUNT COG]


MESOTRAX COG

•Besonderes Merkmal der MESOTRAX SPIRAL COG:

→ **Bidirektionales 3D (dreidimensionales)COG**

Die Wiederhaken der MESOTRAX SPIRAL COG werden durch eine Rotationsschneidetechnik mit einem Radius von 360°C hergestellt.

Die Technik erlaubt eine einheitliche Fixierung der Wiederhaken in jedem Gewebe, dadurch werden die typischen COG Asymmetrieprobleme verhindert, eine häufige Komplikation bei der COG Behandlungen.

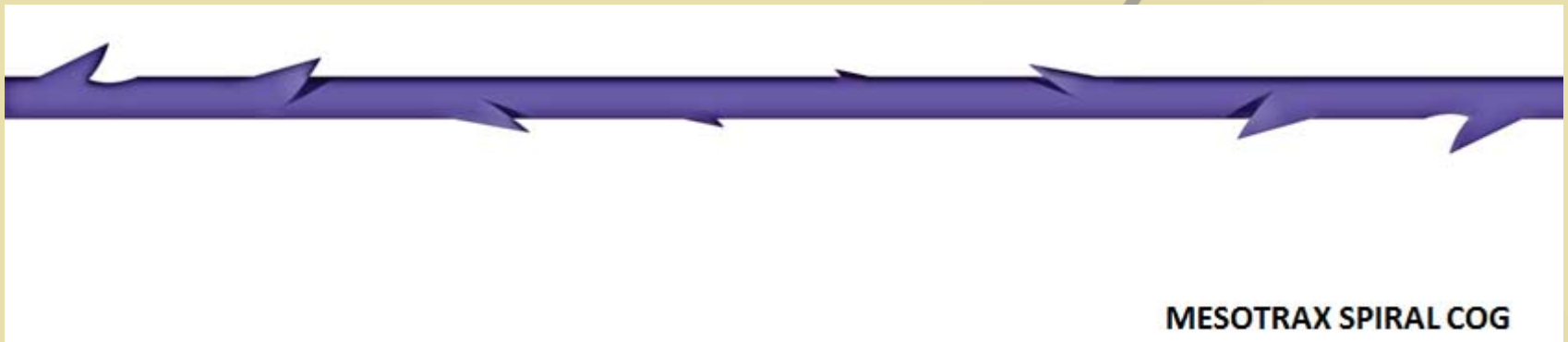

MESOTRAX COG

ARTIKEL	Durchmesser	Farbe des Griffs	USP	Nadellänge	Fadenlänge
SPIRAL SHARP COG	23G	Blau	3-0	38mm	95mm
				60mm	115mm
				90mm	145mm

ARTIKEL	Durchmesser	Farbe des Griffs	USP	Nadellänge	Fadenlänge
SPIRAL BLUNT COG	21G	Grün	2-0	60mm	120mm
				90mm	150mm
	19G	Cremerfarben	1-0	100mm	160mm

ULTRA SPRING

1) Hauptmerkmale

Der **ULTRA SPRING Faden** besitzt ein sehr dicht gedrehtes "Spiralgewinde", dies wurde speziell für bessere Lifting- und Volumeneffekte entwickelt. Dieser speziell entwickelte Faden hat eine große Festigkeit, der Widerstand beim Einführen der Nadel in die Haut ist größer als bei herkömmlichen Fäden.

Wenn der Faden eingeführt ist, hat er die Fähigkeit durch sein dicht gedrehtes Spiralgewinde mit mehr Gewebe in Berührung zu kommen und dadurch deutlich stärker die Kollagenese zu unterstützen.

2) Produkt

Name	Gauge / Farbachse/ Nadeldurchmesser	Nadellänge	Fadenlänge	USP
ULTRA SPRING	27G / Grau / 0.412~0.413	40mm	100mm	6-0

3) Verpackung

Farbe: **Violett**



1) Hauptmerkmale

Der EYE LIFT Faden ist ein dünner PDO-Faden mit einer stumpfen Kanüle, dieser ermöglicht ein Behandlung des periorbitalen Bereiches ohne die Kapillare zu verletzen.

2) Produkt

Name	Gauge / Achsenfarbe / Nadeldurchmesser	Nadellänge	Fadenlänge	USP
EYE LIFT	30G / Gelb / 0.298 ~ 0.320	25mm	35mm	6-0

3) Verpackung

Farbe: **Hellgrün**



Was ist der DIAMOND V FIXER für ein Faden?


Der PDO Faden wurde speziell für das Gesichtsliftung, zur Wiederherstellung der „V – Linie“ entwickelt.



DIAMOND V FIXER
(Geformter Schneidfaden)



Schneidfaden A

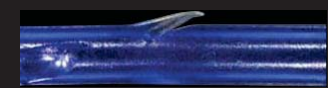


Schneidfaden B



Schneidfaden C

Beschreibung

Produktname	DIAMOND V FIXER
Materialtyp	PDO (Polydioxanon)
Nadel	18G 100mm
Fadenlänge	19.5Cm(COG part – 9Cm)
Größe USP	1-0
Nadelform	Spiegel Typ 180 Doppel Widerhaken bidirektional
Stück pro Paket	4

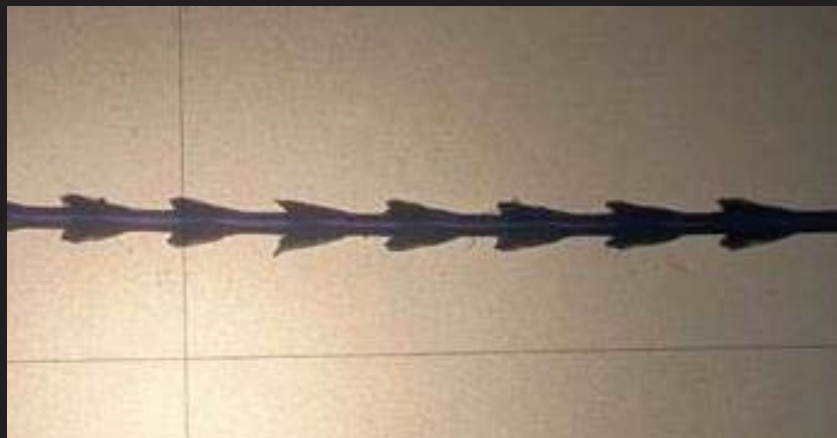

Anwendungsbereiche

- ✓ Lifting der Gesichtskonturen
- ✓ Verbesserung der Marionettlinie
- ✓ Verbesserung der Nasolabialfalten
- ✓ Sichtbare Ergebnisse 1-2 Jahre

Der DIAMOND V FIXER Faden verfügt über 180 Wiederhaken, die ermöglicht eine effiziente und gleichmäßige Verankerung im Gewebe.

Es lässt sich eine dreimal höhere Anker- und Zugfestigkeit im Vergleich zu den einfach geschnittenen Fäden (cut-threads) errichten. Der DIAMOND V Fixer Faden ermöglicht beste Ergebnisse.



Vorteile

- ✓ Zugfest
- ✓ Starke Verankerung
- ✓ Sichtbare Ergebnisse (1-2 Jahre)
- ✓ Geringere Nebenwirkungen


Vorteile

✓ Lang anhaltende Ergebnisse

DIAMOND V FIXER
USP 2-0

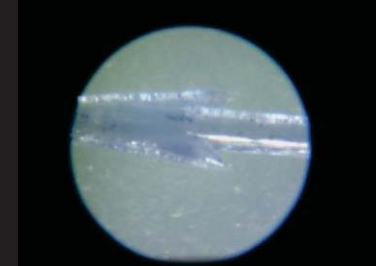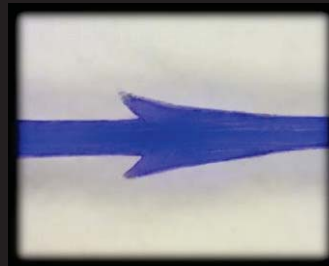

Geschnittener
Faden
USP 1-0

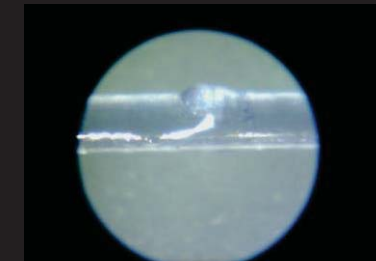

0 Tag

30 Tage danach

90 Tage danach

✓ Sicherheit

- **Polydioxanon**

: Biologisch abbaubares Material (180 Tage)

- **Doppelpackung: Der DIAMOND V FIXER Faden ist in einer Doppelpackung abgepackt.**

- **Sterilisiert mit E0 Gas**

Vergleich



	Geschnittener Faden1	Geschnittener Faden2	Geschnittener Faden3	Geformter Schneidfaden	Geformter Schneidfaden
Zugfestigkeit	+	+	+++	+++++	+++++
Verankerung	+	+	++++	+++++	+++++
Anhalten des Ergebnisses	+	+	+++	++++	+++++
Gewebetraum	++	++	+++	+++++	++
Preis	+	++	++++	+++++	++++
Behandlungsdauer	20Minuten	20Minuten	20Minuten	30Minuten	20Minuten
VK Preis	+	+	++	++++	++++